

Xiaomi Soocas C1 Electric Toothbrush

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Xiaomi Soocas C1 Toothbrush Manual HU v1.0 - 1. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy Xiaomi terméket választott!

Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni.

A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!

A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!

Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

FIGYELMEZTETÉS

- Első használatoknál viszketést érezhet, vagy enyhe vérzést tapasztalhat, ez normális jelenség. Ez azért van így, mert az íny nincs felkészülve erre a hatékony tisztítást
- Ez a tünet általában 1-2 héten belül elmúlik. Amennyiben a tünetek nem múlnak el, fejezze be a fogkefe használatát és konzultáljon fogorvosával.
- Azok a felhasználók, akik fogászati kezelés, szájsebészeti eljárás alatt állnak, vagy implantátumot viselnek, csak fogorvos felügyelete alatt használják a fogkefét.
- A Xiaomi Soocas C1 termék minden biztonsági előírásnak megfelel az elektromágneses készülékekkel kapcsolatban. A pészmekekkel és implantátumokkal kapcsolatban konzultáljon orvosával a termék használata előtt.
- Ez a termék csak a fogak, az íny és a nyelv tisztítására használható. Ne használja ettől eltérő célokra. Amennyiben kellemetlenséget, vagy fájdalmat érez, fejezze be a termék használatát és konzultáljon orvosával.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és egyéb balesetveszély kockázatát.

- Ne merítse a töltő dokkolót vízbe vagy más folyadékba.
- Tisztítás után ellenőrizze, hogy a töltőaljzat csatlakozója teljesen száraz-e, és ezután dugja be a tápegységbe (nem tartozék).
- Ez a termék beépített újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne dobja a terméket tűzbe.
- A készülék csak beltéri használatra alkalmas, az optimális hőmérséklet kb. 25°C
- A készülék csak otthoni használatra alkalmas.
- A készülék érzékeny műszaki eszköz, kérjük, óvja a leejtéstől és ütődésektől.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, valamint tűző napsugárzásnak vagy közvetlen, nagy hőhatásnak.
- Amennyiben a készülék töltése közben azt tapasztalja, hogy az eszköz túlmelegszik, esetleg füstöt vagy kellemetlen szagot bocsát ki, azonnal válassza le az elektromos hálózatról a tűzesetek megelőzése érdekében!
- Amennyiben a töltő dokkoló sérült, ne használja tovább a terméket.
- Amennyiben a fogkefe megsérült, ne használja tovább a terméket.
- Ne használja a fogkefét tusolás vagy fürdés közben.
- Ne hagyja a készüléket kisgyermek számára elérhető helyen
- A készülék nem játék! Gyermek minden esetben kizárólag szülői felügyelet mellett használhatja! A készüléket és tartozékait, valamint a csomagolás részeit kisgyermek elől elzárva tartsa, mert a kis alkatrészek fulladást vagy egyéb sérülést okozhatnak!
- A készülék használatát 8 éves kor felett javasoljuk.
- Javasoljuk, hogy azon személyek, akik fizikailag, érzékszervileg, vagy mentálisan korlátozottak, csak felügyelet alatt, vagy akkor használják a készüléket, ha a termék használatának módját és az esetleges veszélyeket, kockázatokat teljesen megismerték és megértették, és részesültek a megfelelő oktatásban.
- A készüléket hűvös, száraz és pormentes helyen tárolja.
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét.

Xiaomi Soocas C1 Toothbrush Manual HU v1.0 - 2. oldal

A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.

A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

- Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.
- Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
- Csak a készülékkel kompatibilis hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a garanciát. Húzza ki az adaptert a fali aljzatból, amikor nem használja azt.
- Ellenőrizze a terméken lévő töltési paramétereket (V) és ennek megfelelő hálózati tápegységet használjon.
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne szedje szét a szárításhoz ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb.
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez.
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +40°C felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort.
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék alaplapjában.
- Huzamosabb használat esetén a fogkefe felmelegedhet. Ez normális jelenség.

A fogkefe tisztítása

- Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, mint pl. kamera lencsetisztító kendő.
- Ne használjon kemikáliákat, vagy maró anyagokat tartalmazó tisztítószeret, mert károsíthatják a burkolatát.
- A készülék külső felületét nedves ruhával tisztíthatja meg.

Használati tippek

- Ne ossza meg másokkal a fogkefe használatát.
- Ne tekerje a kábelt a töltő dokkoló köré, mikor az tápegységhez van csatlakoztatva.
- Ne helyezzen fém tárgyat a töltő dokkolóra töltés közben, miközben az tápegységhez van csatlakoztatva.

JELLEMZŐK

Modell:	C1
Névleges feszültség:	3.7V
Névleges teljesítmény:	2W
Töltési idő:	Kb. 12 óra
IP vízállósági osztály:	IPX7
Töltés:	Indukciós
Töltő dokkoló bemenet:	5V=0.5A

* Minden adat belső laboratóriumi körülmények között mért eredmény és a különböző használati szokások és a környezet változása miatt a valóságban eltérhetnek.

A DOBOZ TARTALMA

- Fogkefe
- Csatlakozás védőburkolat
- Töltőállomás
- Kefefej
- Kefefej védőburkolat
- Felhasználói kézikönyv
- Jótállási jegy

Hulladékkezelés

A hulladékkezelésre a 2002/96/EK európai irányelv vonatkozik.

Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet.

Gyártó:

Soocas (Shenzhen) Technology Co., Ltd. (Mi Ecosystem Company)

Address: Room 201, Building A, No. 1, No. 1, Qianwan Road, Qianhai Shenzhen-Hong Kong Cooperative Zone, Shenzhen City, China

Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat)

A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati útmutatóval kerül forgalomba.

A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének megfelelően.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek.

© 2019 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére.



IMPORTŐR:

WayteQ

WAYTEQ EUROPE KFT. | 1097 Budapest, Gubacsi út 6.
Tel.: (+36-1) 21-73-632, (+36 1) 21-73-631 | Fax: (+36-1) 21-73-619
Email: info@wayteq.eu | Web: www.wayteq.eu www.xiaomi.hu

Xiaomi Soocas C1 Toothbrush Manual HU v1.0 - 4. oldal
A dokumentum és annak teljes tartalma a WayteQ Europe Kft. tulajdona.
A WayteQ Europe Kft. írásos hozzájárulása nélküli felhasználása szigorúan tilos.

KEZELŐSZERVEK

Tengelyvédő
kupak




Be/kikapcsoló gomb
Be/Ki/Módváltás

Fogkefe nyél

Cserélhető panel

Bekapcsolás jelző


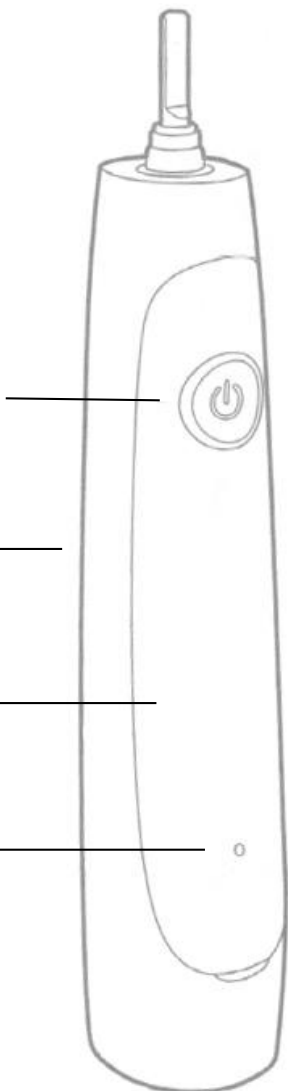


Kefefej



Kefefej védőkupak

Töltő dokkoló

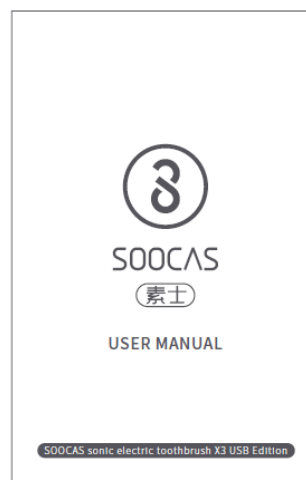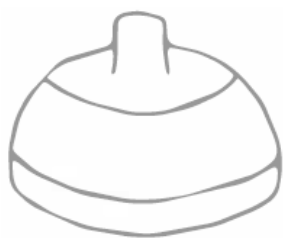


Használati útmutató

SZÉTSZERELÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS


A fogkefe nyele egy cserélhető panelt tartalmaz és a tartozék doboz még egy panelt tartalmaz. Kiválaszthatja az önnek tetsző panelt a használathoz.

Felhelyezés: Távolítsa el az átlátszó fóliát, válassza ki a megfelelő panelt, húzza le a matricát a panelről, igazítsa be a nyél megfelelő helyzetéhez és óvatosan nyomja be a nyélbe.

Megjegyzés: a kialakítás miatt a hézagok száma egyenlőtlen.

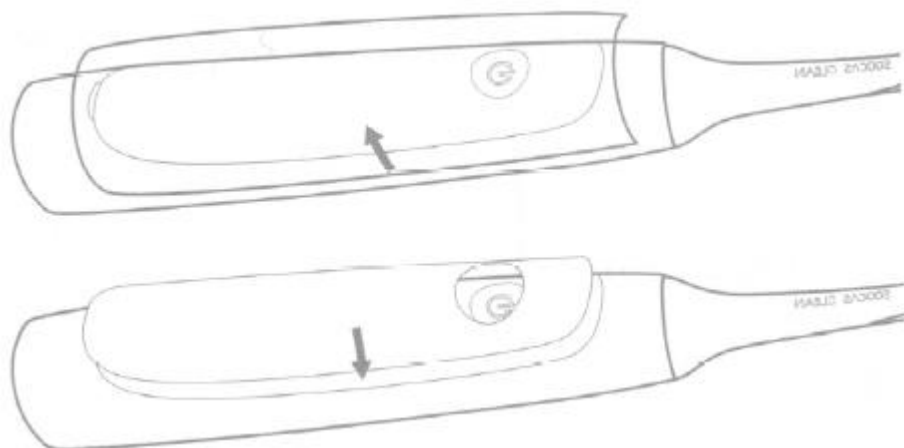

Eltávolítás: emelje ki a panelt egy egyenes fejű eszközzel, mint pl egy csavarhúzó.

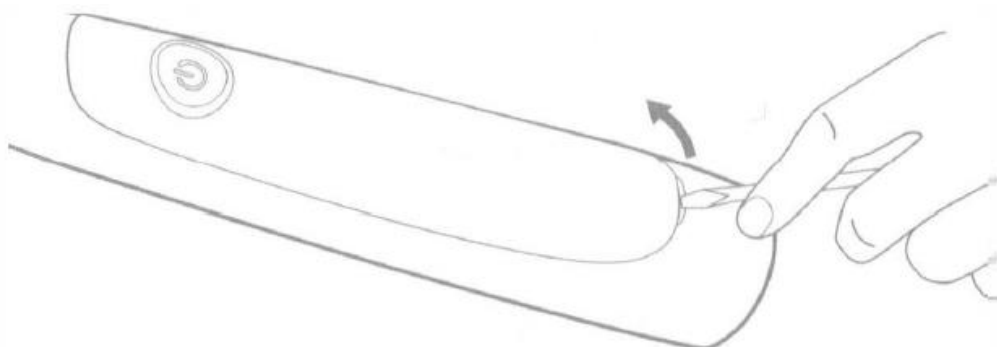


Megjegyzés: Azon személyek (köztük gyermekek), akik nem rendelkeznek megfelelő képességgel és tapasztalattal ne távolítsák el a panelt.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

a) Kefefej felhelyezése

Erősítse a kefejet a fogkefe nyeléhez és győződjön meg róla, hogy egy kis rés van a két alkatrész között. Ez a rés biztosítja, hogy a kefeje ne súrlódjon a fogkefe nyeléhez a nagy frekvenciájú rezgés közben, így a motor sokkal erősebben üzemelhet.

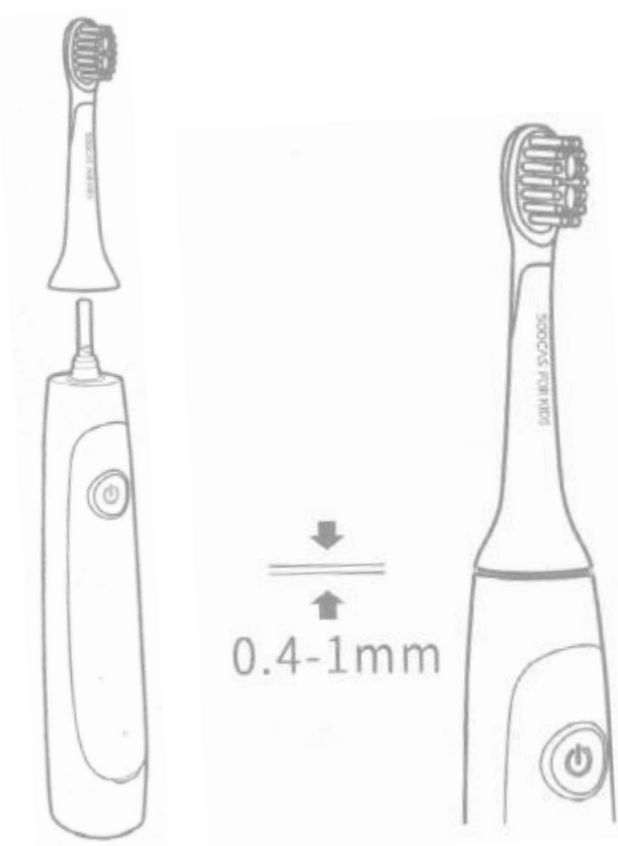



b) Fogkrém kipréselése

Nedvesítse meg a kefejet és préseljen rá a fejre megfelelő mennyiségű fogkrémet.



c) A fogak egészséges tisztítása

- Lassan mozgassa a fogkefét, miközben 45°-os szöget tart a fogkefe feje és az íny és a fognyak vonala között.
- Használhatja a Be/Ki gombot az üzemmód váltásra fogmosás közben is.
- Fogmosás közben a fogkefe időnként vibrál, emlékeztetve Önt arra, hogy váltson fogmosási pozíciót.

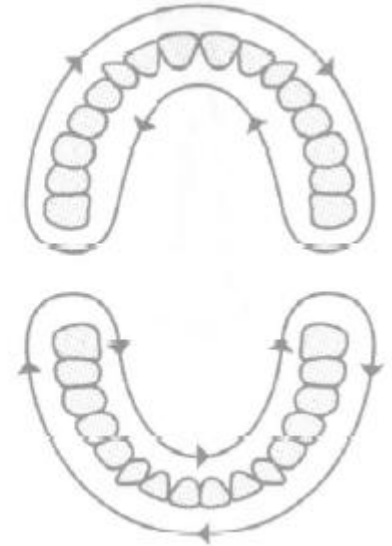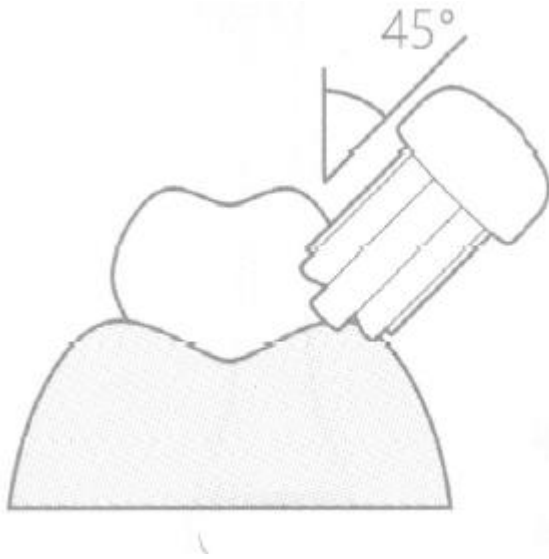

Be/ki/ mód váltó

Bekapcsolás: kikapcsolt állapotban nyomja meg a gombot

Kikapcsolás: bekapcsolt állapotban nyomja meg a gombot a szüneteltetéshez, ha 30 másodpercig nincs művelet, akkor a fogkefe kikapcsol

Mód váltás: bekapcsolt állapotban nyomja meg és tartsa nyomva a gombot

Puha mód: ez az üzemmód akkor ajánlott, ha olyan gyermek használja, aki egyedül is képes fogat mosni.

Tanuló mód: ez az üzemmód alacsony fokozaton megtanítja a gyermekeket a helyes fogmosásra.


Memória mód: a fogkefe a következő bekapcsoláskor az utoljára használt üzemmódban kapcsol be

d) A kefefej tisztítása

- Fogmosás után mossa el folyó víz alatt a kefefejet.
- Tisztítás után helyezze fel a kefefej védő kupakot, hogy a fejet tisztán és higiénikusan tartsa.



TÖLTÉS JELZÉS

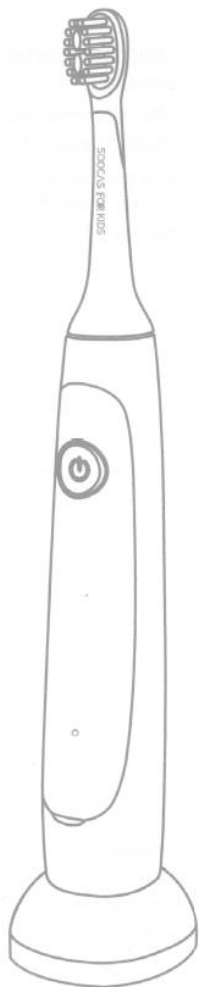

- Energiaszint jelzés bekapcsolt állapotban:
100%-40%: A fehér jelzés világít; 40%-10%: A vörös jelzés világít; <10%: A vörös jelzés kétszer villan, majd kialszik;
A fogkefe nyomása túl erős: A vörös jelzés villog
- Energiaszint jelzés töltés közben:
>100%: A fehér jelzés világít; 100%-40%: A fehér jelzés villog; <40%: A vörös jelzés villog.

SOOCAS ALKALMAZÁS

Az alkalmazás letöltése

Keresse meg a SOOCAS alkalmazást az alkalmazásboltban vagy olvassa be a QR kódot.



Adatok szinkronizálása

- Töltse le az alkalmazást, regisztráljon egy Soocas fiókot, válasszon egy karaktert és nevezze el.
- Jelölje ki a szereplőt és lépjen be „Mosó szobába” (karakter megjelenítő hely)
- Engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot. Érintse meg a fogmosás indításához. Kapcsolja be a fogkefét. Így a gyermek a video alapján egyszerűen és játékosan megtanulhatja a fogmosást.
- A fogmosás végén a kaland térkép jelenik meg. A karakter a fogmosás idejétől függő energiát kap.
- Minden pontra érkezéskor a karakter egy gyümölcsöt kap. A a hátszámban lévő különböző gyümölcsökről a gyermek gazdagíthatja tudását. A jövőben a Soocas bővíteni fogja a jutalmakat és a térképet.
- További információért kövesse az alkalmazás leírását. A fenti információk az alkalmazás verziójától függően változhatnak.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges ok
A készüléket nem lehet bekapcsolni	A készülék töltés alatt van. A készülék éppen Bluetooth kapcsolatban van. Az akkumulátor lemerült.
A kefefej nem lehet feltenni a tengelyre	A fogkefébe idegen tárgy szorult. Fogkrém vagy más anyag ráragadt a tengelyre. A fogkefe nem eredeti Xiaomi Soocas C1 termék.
Az energiafelhasználás nagy és a készüléket sokszor kell tölteni	A készülék már régen Bluetooth kapcsolódási üzemmódban van. A készüléket nagyon gyakran használják.
A kefefej vibrációja nem elegendő	A kefefej nincs megfelelően a helyén. Idegen tárgy szorult a markolat és a kefefej közé.
Az alkalmazás nem tud csatlakozni a fogkeféhez	A Bluetooth a telefonon nincs engedélyezve. A fogkefe nincs megfelelő távolságban a telefontal. A fogkefe használat közben van.